


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Пипетки стеклянные к СОЭ-метру ПС/СОЭ -01 «МиниМедПром»

Назначение средства измерений

Предназначены для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов. Пипетка входит в состав прибора СОЭ-метр ПР-3, применяемого в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения.

Описание средства измерений

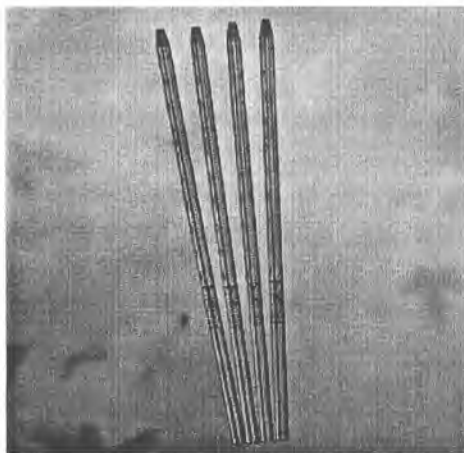

Пипетка представляет собой прямую капиллярную трубку с зашлифованным нижним торцом. Вдоль капилляра нанесена шкала

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений высоты столба плазмы, мм	0-90
Цена деления шкалы, мм	1,0
Ширина штрихов шкалы, мм, не более	0,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины интервалов между любым и начальным штрихами шкалы пипетки, мм	$\pm 0,5$
Внутренний диаметр капиллярной трубки пипетки, мм	$1,4 \pm 0,2$
Габаритные размеры пипетки, мм	
- длина, не более	174,5
- внешний диаметр	5 ± 1
Масса пипетки, кг, не более	0,012
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от 10 до 35
- относительная влажность при 25 °С, не более.%	80


Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

Комплектность средства измерений

1. Пипетка – 100 шт.
2. Этикетка – 1 шт.
3. Коробка – 1 шт.

КОПИЯ ВЕРНА

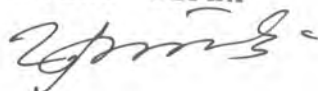

Поверка

осуществляется по методике поверки МИДП. 418539.001.МП, согласованной ГЦИ СИ ВНИИОФИ 21 мая 2002 г. При поверке применяются: мера длины штриховая КЛ, 3 разряда; калибр - пробка предельный Пр 1,2+0,02, Не 1,6-0,02, лупа измерительная ЛИ-3-10х, ПГ- 0,0015 мм.

Сведения о методиках (методах) измерений

При использовании пипеток применяется метод прямых измерений, который приведен в этикетке.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к пипеткам стеклянным к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 «МиниМедПром»

1. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»
2. ТУ 9443-005-52876351-2002 «Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 «МиниМедПром». Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление деятельности в области здравоохранения ((используются в клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения).

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МиниМедПром»
(ООО «МиниМедПром»),
242600, г. Дятьково, Брянская обл., ул. Ленина, 182, корп. 5
тел. (48333) 3-44-05, факс (48333) 3-27-02, E-mail: MiniMProm@yandex.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области»,
Регистрационный номер 30083-08,
г. Клин, Московская обл., ул. Дзержинского, д.2,
тел (49624) 24162, факс (49624) 77070, E-mail: klincsm@mail.ru,

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Е.Р. Петросян

« ___ » _____ 2012 г.