

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

Н.А. Жагора

2010 г.



ГСО состава водного раствора гемоглобинов, электролитов, метаболитов и газов крови серии AutoCheck6+ (S7835, S7845, S7855, S7865)

Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный номер ГСО РБ 2162-09

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: Radiometer Medical ApS, Дания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для метрологического контроля анализаторов крови с установленным AutoCheck модулем ABL817 FLEX, ABL827 FLEX, ABL837 FLEX фирмы «Radiometer Medical ApS», Дания.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО:

методика поверки МРБ МП. 2006 -2010 «Анализаторы крови ABL».

ОПИСАНИЕ

Стандартные образцы представляют собой водные растворы, содержащие биологический буфер, соли, консерванты и красители, а также глюкозу и лактат, насыщенные газами CO₂ и O₂, расфасованные в стеклянные ампулы по 0,7 мл.


НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Единица измерения	Интервал допускаемых значений для S7835 Уровень 1	Расширенная неопределенность	Интервал допускаемых значений для S7845 Уровень 2	Расширенная неопределенность	Интервал допускаемых значений для S7855 Уровень 3	Расширенная неопределенность	Интервал допускаемых значений для S7865 Уровень 4	Расширенная неопределенность
		*Нижнее и верхнее значение интервалов могут незначительно изменяться в зависимости от партии							
pH		7,099 7,141	0,007	7,399 7,441	0,006	7,579 7,621	0,010	6,799 6,841	0,006
pCO ₂	мм рт. ст.	63,4 70,6	1,4	37,5 42,5	0,9	20,1 23,1	0,7	88,4 96,4	2,1
pO ₂	мм рт. ст.	128 152	5,0	75 100	4,5	27,4 51,4	7,5	270 310	9,4
ctHb	г/дл	7,4 8,0	0,2	12,0 12,6	0,3	18,2 19,0	0,3	2,0 2,4	0,2

sO_2	%	48,5 49,5	0,1	98,3 99,3	0,4	68,4 69,4	0,2	3,5 4,5	0,1
FO_2Hb	%	43,0 44,0	0,2	90,8 91,8	0,3	47,7 48,7	0,3	2,1 3,1	0,2
$FCONb$	%	3,8 5,4	0,2	0,4 1,6	0,3	17,3 18,9	0,3	7,9 8,9	0,2
$FMetHb$	%	3,5 4,5	0,2	0,5 1,5	0,3	8,5 9,5	0,3	18,2 19,2	0,2
$FHbF$	%	3,5 18,5	0,2	63,0 73,0	0,3	22,5 37,5	0,3	5,8 6,2	0,2
cK^+	ммоль/л	1,83 1,99	0,06	3,80 4,60	0,06	5,60 6,40	0,06	6,60 7,40	0,10
cNa^+	ммоль/л	167 175	0,9	147 155	0,9	130 138	0,9	127 137	0,9
cCa^{2+}	ммоль/л	0,88 1,18	0,03	0,43 0,57	0,03	0,29 0,39	0,03	1,55 1,85	0,04
cCl^-	ммоль/л	123,9 131,7	1,7	98,7 106,5	1,7	73,8 81,6	1,7	86 94	1,7
$cGlu$	ммоль/л	1,6 2,0	0,3	4,7 6,7	0,4	13 15	0,8	-0,1 0,1	0,2
$cLac$	ммоль/л	3,7 5,7	0,2	1,7 1,9	0,2	10,5 12,5	0,4	-0,1 0,1	0,2
$cCrea$	мг/дл	2,03 2,43	8,2	0,18 0,28	1,9	3,8 4,8	10,0	-	2,0
$ctBil$	мг/дл	9,9 10,7	0,2	16,1 16,9	0,3	24,3 25,5	0,3	2,6 3,2	0,2

Срок годности экземпляра СО: 24 месяца при температуре (2-10)^oC с даты изготовления.

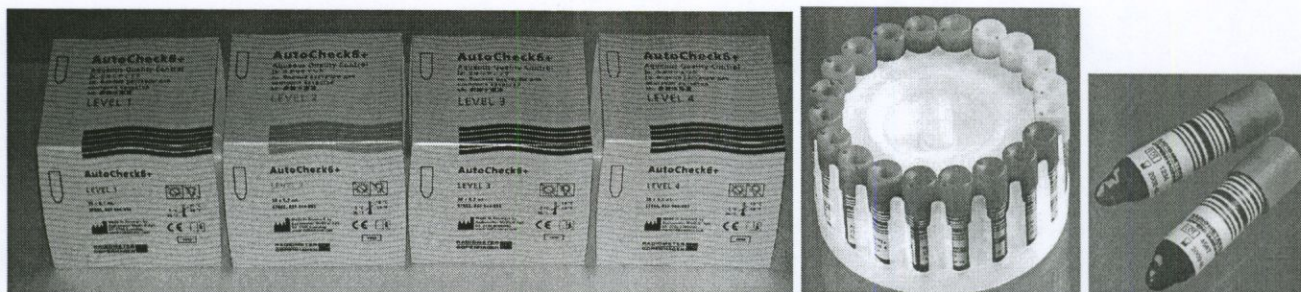

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

Radiometer Medical ApS, Дания.
Адрес: Akandevej 21, DK-2700 Bronshoj, Denmark

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Radiometer Medical ApS, Дания.
Адрес: Akandevej 21, DK-2700 Bronshoj, Denmark

Доверенное лицо компании
«Radiometer Medical ApS»